


restool

家庭用

コンパクトシートマッサージャー

HT-4700J / HT-4703J / HT-4705J

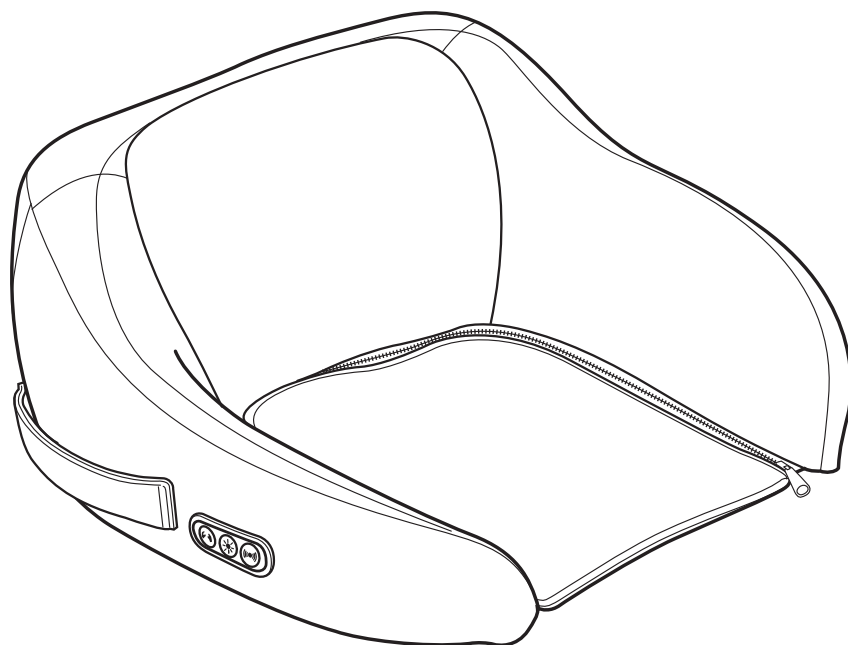

取扱説明書・保証書

- * ご使用前に、本書を必ずお読みください。
- * 本書は常にお手元においてご使用ください。
- * 本書は保証書を兼ねているため、紛失しないよう大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	3
使用者について.....	3
本体・付属品について.....	5
各部の名称と働き	7
使い方	8
腰部・臀部・背中をマッサージする.....	8
首や肩をマッサージする.....	10
バイブレーションモードを使用する.....	11
ヒーターモードを使用する.....	11
お手入れと保管	12
保管について.....	12
故障かなと思ったら	13
商品仕様	14

保証期間について

保証期間は1年です

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、保証書を紛失すると、お買い上げ日から1年以内でも有料修理となります。ご使用状況によっても有料修理となることがありますので、保証書と本書をよくお読みください。

保証期間の終了後は

修理可能な故障の場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
スムーズなアフターサービスを実現するため、保証期間の終了後も保証書を保管してください。

メモ 交換部品の保証期間は、交換修理から90日間です。
期間中に同じ部品が故障した場合、無料で修理いたします。

ユーザー登録

修理受付時や、製品および交換が必要な付属品をご購入の際にはお客様確認が必要となりますので、ご登録をお願いいたします。

ご登録いただきますと、お問い合わせ時の対応が迅速に進みます。

さらに、ご希望の方には新製品やキャンペーンの情報などをお届けします。

ご登録方法

インターネットから

公式サイトよりご登録いただけます。

<https://restool.jp/>

お電話から

セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。

安全上のご注意

使用する方や他の人々への危害や物的損害(本体および付属品を含む)を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。本商品を使用する前に、必ずすべての項目をご確認ください。

⚠ 警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。

⚠ 注意 人が重傷を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

注意 何らかの故障や異常が発見されたときは

- 万一、商品から煙が出たり、変なにおいがしたり、過熱するなど、何らかの故障や異常が発見されたときは、ただちに使用を中止し、プラグをコンセントから抜いてください。発火や感電、事故、けがの原因になります。
- 煙が出なくなったのを確認し、セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。
お客様による修理は、危険ですので、絶対に行わないでください。

図記号について



この行為は
禁止されています



この行為を
必ず実行してください

使用者について

⚠ 警告



医師からマッサージを禁じられている人は使用しない

血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など、症状を悪化させる原因になります。



他の健康用機器や治療器と併用して使わない

事故やけが、体調不良を起こす原因になります。



マッサージ以外の目的に使用しない

事故やけが、体調不良を起こす原因になります。



のどや頭部、胸部、腹部、骨部(ひじ、ひざ)に使用しない

事故やけが、体調不良を起こす原因になります。



施療部位の周りにアクセサリなどを着けた状態で使用しない

事故やけがの原因になります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがの原因になります。

警告



子供に使用させない、また本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない

事故やけがの原因になります。



食後および飲酒後は使用しない

体調不良を起こす原因になります。



車や機械の運転中に使用しない

事故やけがの原因になります。



過度に背もたれに体重をかけすぎない

事故やけがの原因となります。また、椅子の形状によっては転倒の原因となります。



本体の上に寝た状態で使用しない

負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



次のような人は、使用する前に医師に相談する

事故や体調不良を起こす原因になります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人
- 皮膚に創傷や異常のある人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人
例）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強いときや衰弱しているとき
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人
- 背骨（脊椎）に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
- 腱鞘炎の人
- その他、医療機関で治療中の人



使用中、身体に異常が現れた場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良を起こす原因になります。



本商品の使用時間は1日15分以内とし、連続使用を避ける

同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良を起こす原因になります。また、ヒーターが稼働中、ヒーター部に長時間皮膚の同じ個所が触れると低温やけどの原因になります。直前に本商品のヒーター機能を使用した人がいる場合に連続使用すると、低温やけどの原因になりますので、ヒーターの温度が下がりきったことを確認してからご使用ください。



しばらく使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談する

事故やけが、体調不良を起こす原因になります。



本商品は表面が熱くなるため、熱に敏感ではない人は注意して使用する

やけどの原因になります。



使い始めは、弱い刺激で使用する。敏感肌の方は、お肌の様子を見ながら使用する

事故やけが、体調不良を起こす原因になります。



首の周りに使用するとき、もみ玉が強く当たりすぎないようにする













事故やけが、体調不良を起こす原因になります。

本体・付属品について

⚠ 警告

-  **絶対に分解や修理、改造、改変をしない**
感電の原因になります。また、発火や異常動作によるけがの原因になります。
-  **身体や衣類が濡れた状態で本商品を使用しない**
感電の原因になります。
-  **濡れた手でアダプターの抜き差しをしない**
感電の原因になります。
-  **浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **操作パネルやマッサージ部に水などをこぼさない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **付属のアダプター以外は使用しない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **付属のアダプターを本商品以外に使用しない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **アダプターに負荷をかけたり、傷つけたりしない**
アダプターの誤った取り扱いは、発火や感電の原因になります。次のことをお守りください。
 - アダプターを加工したり傷つけたりしない
 - アダプターを熱器具に近づけない
 - アダプターの上に重いものを載せたり、無理にコードを曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない
 - アダプターが傷ついていたたり、コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない
 - コンセントからアダプターを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く
-  **本体やアダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **布地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **ヒーターは医療用途に使用しない**
健康を害する恐れがあります。
-  **本体やアダプターにほこり等が付着している場合は拭き取り、清潔に保つ**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **使用前に必ず保護カバーが破れていたり、取り外されていないことを確認する**
保護カバー（マッサージ部の布地）が破れたり、外された状態で使用しないでください。
どんな小さな破れでも、見つかった場合は使用を中止し、セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。保護カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがの原因になります。
-  **使用前に操作パネルの各ボタンやオートパワーオフ(P.9)が正常に作動することを確認する**
事故やけがの原因になります。
-  **動かなくなったときや、異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、アダプターをコンセントから抜く**
発火や感電、事故、けがの原因になります。セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。
-  **アダプターのコネクターやプラグは容易に抜けないように奥までしっかり差し込む**
感電やショート、発火の原因になります。
-  **停電のときはただちにアダプターをコンセントから抜く**
アダプターがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがの原因になります。
-  **お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く**
感電やけがの原因になります。
-  **電源は交流用100V専用コンセントを使用する**
火災やけがの原因になります。

⚠ 注意


-  **直射日光の当たる場所やこたつなど熱を発する器具の近く、ふとんの中で使用しない**
本体内部の温度が上昇し、発火や事故、故障の原因になります。
-  **金属や燃えやすいものを近づけない。たばこを吸いながら使用したり、火気の近くで使用したりしない**
発火や感電、故障の原因になります。
-  **使用中は眠らない**
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。
-  **本体やもみ玉の上に立ったり、もみ玉の上に座ったりして使用しない**
故障や事故の原因になります。
-  **ハンドルを強く引っ張ったり、振り回さない**
思わぬ事故やけがのおそれがあります。
-  **お手入れの際、本体やアダプターには水をかけない。水洗いは絶対にしない**
故障やショート、発火の原因になります。
-  **お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しない**
変形や変色、変質など本体の外装を傷めるだけでなく、ひび割れによるけがの原因になります。
-  **安定した場所で使用する**
不安定な場所で使用した場合、使用中に本体が動き出し、事故やけがの原因になります。
-  **使用後は汚れや破損がないことを確認し、熱を発する器具や直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する**
変色や変質、故障の原因になります。
-  **アダプターのコードはねじれをほどいて保管する**
収納時などにアダプターのコードを本体やアダプターへ巻きつけると、発火や感電の原因になります。
-  **長期間使用しない場合は、必ずアダプターをコンセントから抜く**
絶縁劣化による発火や感電の原因になります。
-  **長期間使用しなかった場合は、使用前に動作の確認をする**
内部部品が劣化している場合、事故やけがの原因になります。正常に動作しない場合は、必ずセールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)

注意


本商品を廃棄するときは分解せず、お住まいの自治体の指導に従ってください。

各部の名称と働き


本体

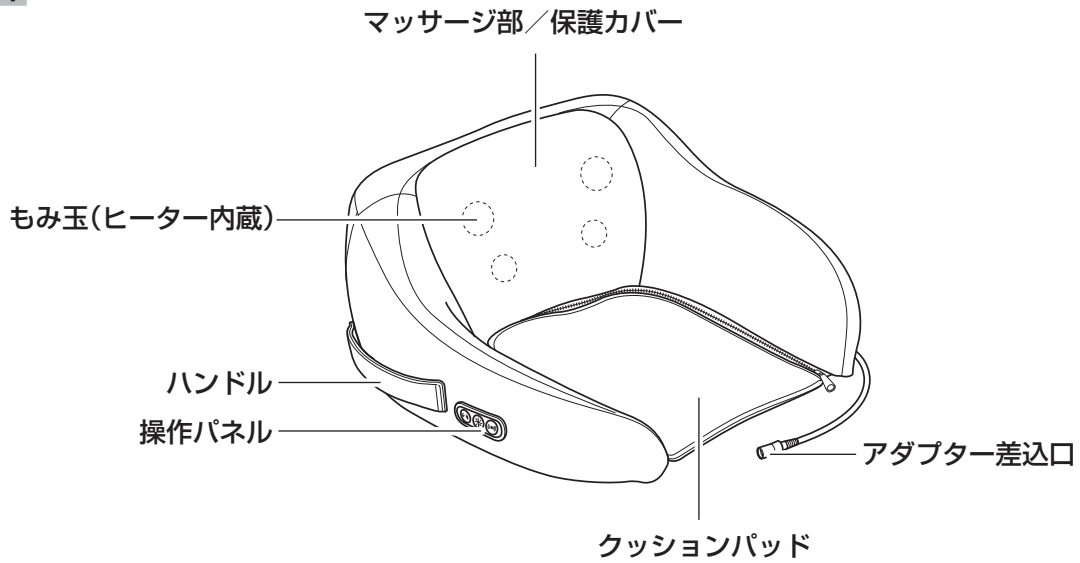

アダプター

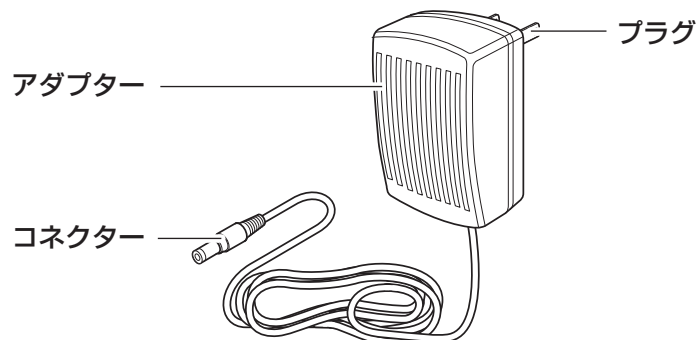

操作パネル

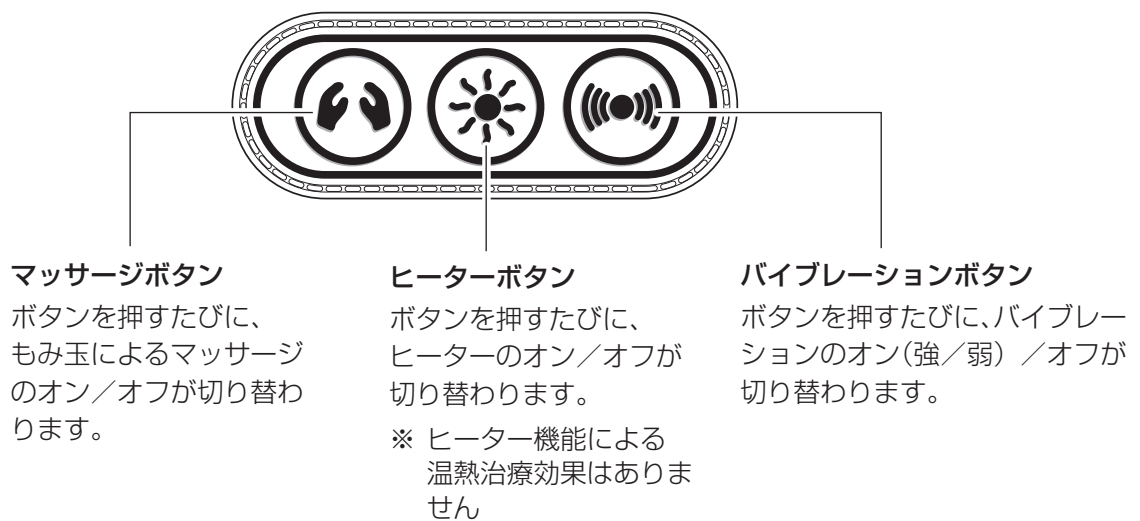


使い方

腰部・臀部・背中をマッサージする


注意

使用前に必ず保護カバー（マッサージ部の布地）が破れていたり、取り外されていないことを確認してください。保護カバーが破れたり、外された状態で使用しないでください。どんな小さな破れでも、見つかった場合は使用を中止し、セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。

- 1 クッションパッドがあると届かない位置をマッサージする場合は、クッションパッドのファスナーを開き、クッションパッドを取り外します。

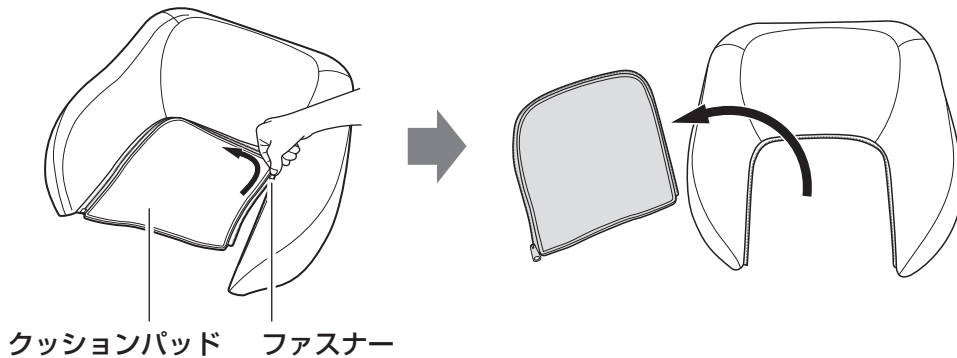


- 2 アダプターのコネクターをアダプター差込口に接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

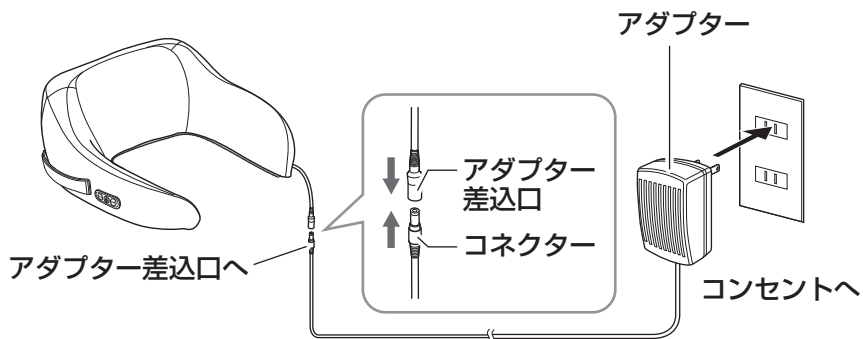


- 3 もみ玉がマッサージしたい位置に当たるように位置を調整して、腰掛けます。


クッションパッドを使用する場合

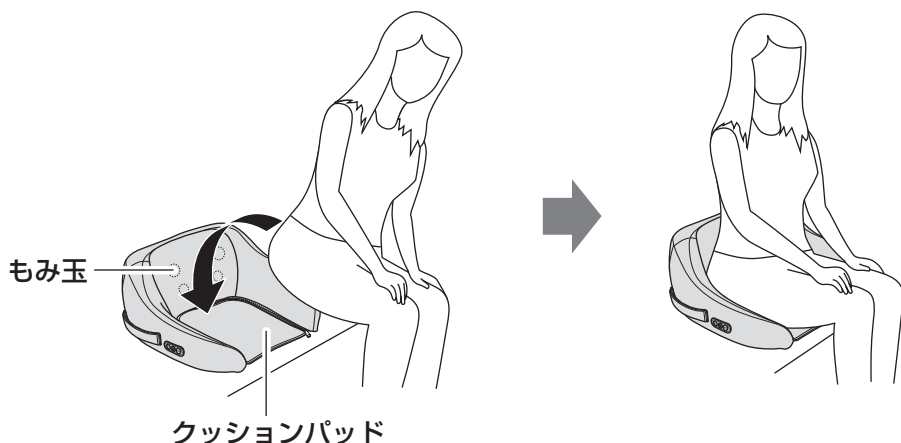

クッションパッドを使用しない場合

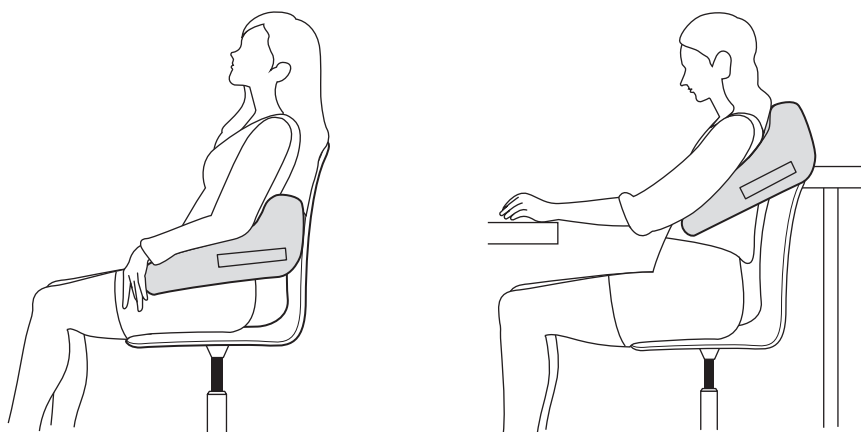

4 (マッサージボタン)を押します。

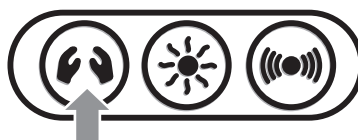

- もみ玉によるマッサージを開始します。
- オートパワーオフにより、マッサージは約15分で自動的に終了します。

オートパワーオフ

施療部への必要以上の刺激を防ぐため、約15分で自動的に動作停止します。

マッサージを途中で止めるには

(マッサージボタン)を再度押してください。マッサージを停止します。

身体に異常を感じたり、非常事態が起こったりしたときは


すぐに (マッサージボタン)を押し、マッサージを停止してください。

首や肩をマッサージする


注意

使用前に必ず保護カバー（マッサージ部の布地）が破れていたり、取り外されていないことを確認してください。保護カバーが破れたり、外された状態で使用しないでください。どんな小さな破れでも、見つかった場合は使用を中止し、セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください(P.15)。

- 1 クッションパッドのファスナーを開き、クッションパッドを取り外します。

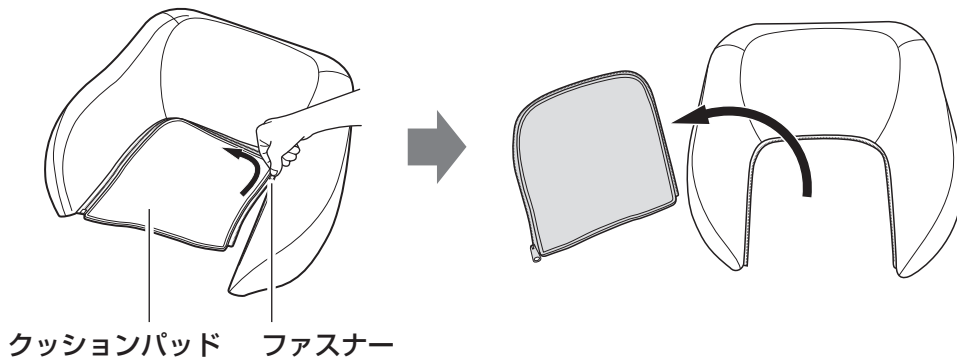


- 2 アダプターのコネクターをアダプター差込口に接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

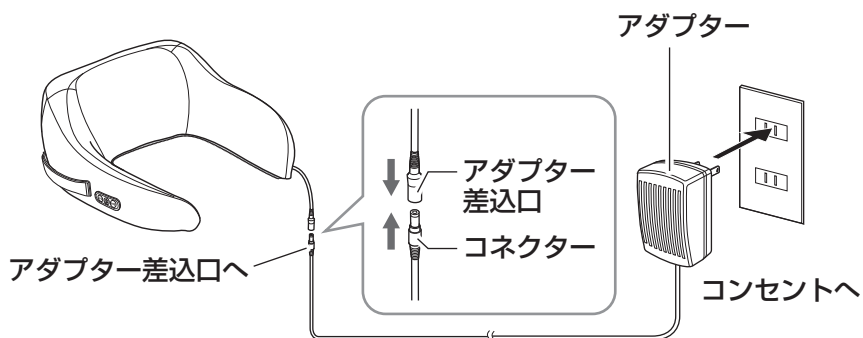


- 3 本体を裏返しにし、ハンドルを両手で持ちながら、もみ玉が肩や首に当たるように位置を調整します。

注意

必ず本体ではなくハンドルをしっかり持って使用してください。

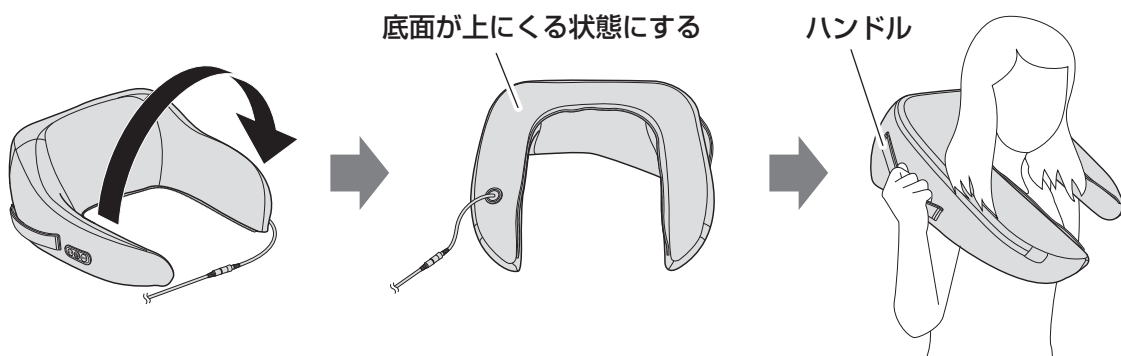

4 ④ (マッサージボタン)を押します。

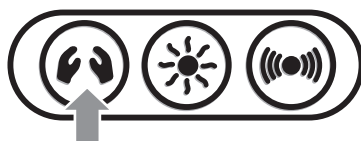

- もみ玉によるマッサージを開始します。
- オートパワーオフにより、マッサージは約15分で自動的に終了します。

マッサージを途中で止めるには


④ (マッサージボタン)を再度押してください。マッサージを停止します。

身体に異常を感じたり、非常事態が起こったりしたときは

すぐに ④ (マッサージボタン)を押し、マッサージを停止してください。

バイブレーションモードを使用する

⑤ (バイブレーションボタン)を押すと、バイブレーションを開始します。また、⑥ (バイブレーションボタン)を押すたびに、バイブレーションの強さを2段階で変えることができます。

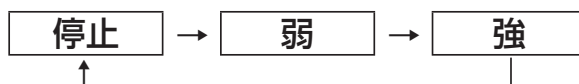

オートパワーオフにより、バイブレーションは約15分で自動的に終了します。

マッサージ中にバイブレーションをオンにした場合は

マッサージが終了するときに、バイブレーションも同時にオフになります。

途中でバイブレーションを止めるには

何回か ⑥ (バイブレーションボタン)を押して、バイブレーションをオフにしてください。

ヒーターモードを使用する

⑦ (ヒーターボタン)を押すと、もみ玉が赤く点灯し、マッサージ部が温かくなります。オートパワーオフにより、ヒーターは約15分で自動的に終了します。
※ ヒーター機能による温熱治療効果はありません。

マッサージ中にヒーターをオンにした場合は

マッサージが終了するときに、ヒーターも同時にオフになります。

途中でヒーターを止めるには

もう一度 ⑦ (ヒーターボタン)を押して、ヒーターをオフにしてください。

お手入れと保管

本体のお手入れ

本体が汚れた場合は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をしみこませてよく絞った布で拭き取ってから、柔らかい布でから拭きしてください。

注意

- 変色や変形防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- アダプターのプラグ(金属部分)は、絶縁劣化防止のため、年に1度から拭きしてください。
- 本体やアダプターには水をかけないでください。水洗いは絶対にしないでください。

保管について

長期間使用しない場合は、汚れやほこりを拭き取ってから、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

注意

- 必ずアダプターをコンセントから抜いてください。
- 子供の手が届かない場所に保管してください。
- 熱を発する器具の近くに保管しないでください。

故障かなと思ったら

修理サービスを依頼する前に、次のことを確認してください。

このようなときは	原因	ご確認ください
動かない	電源に接続されていない。	●アダプターをコンセントに奥までしっかりと差し込んでください。
	アダプターがしっかりと接続されていない。	●アダプターを本体のアダプター差込口に奥までしっかりと差し込んでください。
使用中に突然停止した	オートパワーオフが作動した。	●施療部への必要以上の刺激を防ぐため、約15分で自動的に動作停止します。故障ではありません。尚、マッサージ、ヒーター、バイブレーションを時間差で使用した場合、最初に起動させた機能を起点に約15分で全ての機能が終了します。
	長時間の連続使用により本体内部が高温になるのを防ぐため、安全装置が作動した。	●コンセントからアダプターを抜き、1時間以上経過してから使用してください。
動作音が大きい	構造上の動作音がする。	●故障ではありません。
	長時間の使用により、動作音が大きくなった。	●セールス・オンデマンド サービスセンターにご連絡ください。

その他のトラブルが起きたときは

セールス・オンデマンド サービスセンター (P.15)にご連絡ください。

商品仕様

販 売 名	restool コンパクトシートマッサージャー
品 番	HT-4700J (アーバングレー) / HT-4703J (オリーブグリーン) / HT-4705J (パッションオレンジ)
医療機器認証番号	303AHBZX00028000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器分類	管理医療機器
使用目的・ 効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。
アダプター定格	入力：AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0 A 出力：12 V DC, 2.5 A
消費電力	14W (ヒーターのみ7.2W)
オートパワーオフ	約15分間
外形寸法	約幅460 × 奥行440 × 高さ 200 (mm)
重 量	約2.3 kg (アダプター含む)
材 質	本体：ポリウレタン 他 張地/保護カバー：ポリエステル
も み 玉	○ (ヒーター内蔵)
バイブレーション機能	○ (弱/強モード切替可)
輸 入 元	アドバンスジャパン株式会社 埼玉県川口市大字東本郷118-1
販 売 元	セールス・オンデマンド株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル5階
企 画・開 発	Hutech Industry Co., Ltd. (韓国)
生 産 国	中国

本書の著作権は、セールス・オンデマンド株式会社が保有しており、本書内のいかなる内容および図、表はセールス・オンデマンド株式会社の文書による許可なしに、その全体または一部を複製または転載することを禁じます。製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

書名 restool コンパクトシートマッサージャー 取扱説明書
発行日 2022年5月1日

●ご不明な点や修理に関するご相談は●

お問い合わせの前に、まずは本書でご確認ください

- ・「使い方」(P.8)
- ・「故障かなと思ったら」(P.13)

これらをご用意ください

- ・ 本体およびアダプター
- ・ 保証書（本書裏表紙）
- ・ 最後に正常動作した日付

●ご不明な点や部品交換に関するご相談は●
セールス・オンデマンド サービスセンター
TEL：0120-542-093（通話無料）^{※1}
受付時間 9:30～17:30（土・日・祝日除く）^{※2}

※1 携帯電話からでもご利用いただけます。

※2 午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやすい午後におかけください。

※3 お客様からご提供いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、カタログの発送、その他情報提供に利用させていただきます。

個人情報の取り扱い：<https://www.salesondemand.co.jp/privacy.html>

ホームページ <https://restool.jp/>

交換が必要な付属品・部品などのお求めは.....

交換が必要な付属品や部品などをお求めの際は、セールス・オンデマンド サービスセンター（上記）にお問い合わせください。

お買い上げ合計金額が11,000円（税込）以上の場合、国内配送料と代引手数料は無料になります。11,000円（税込）未満の場合は、別途国内配送料と代引手数料をいただきます。

お支払い方法は、離諸島・一部地域を除き、代金引換（現金・クレジットカード・デビットカード使用可能）です。詳しくは、お問い合わせ時にご確認ください。

.....

注意

- ・ 交換した部品・付属品および商品は、弊社で引き取らせていただきます。
- ・ 商品を使用したことによって発生した損害については、商品の性質上、責任を負いかねます。
- ・ 商品は日本仕様です。日本国外で使用された場合、責任を負いかねます。

保証書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された条件を基に修理をいたします。
修理の際は、必ずこの保証書を添えてご依頼ください。

保証期間 ご購入日 年 月 日から 1年間	シリアルナンバー（本体ラベルに記載）
販売店名・住所・電話番号	お客様情報（必須） 氏名： 住所： 電話番号：

・販売店様へ
この保証書に購入日、貴販売店名、ご住所、電話番号をご記入またはご捺印の上、お客様にお渡しください。

保証事項

- 取扱説明書・添付文書および本体貼付ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に、本保証書の記載内容に基づき交換できる部品のみ無料で部品交換をいたします。
- 保証期間中に故障して無料で部品交換を受ける場合には、商品と本保証書をご提示または送付の上、依頼してください。
- 部品交換はセールス・オンデマンド サービスセンターへのご連絡により承ります。
- 保証期間内でも次の場合には有料での部品交換となります。
 - 本保証書をご提示されないとき。
 - 本保証書の所定事項の未記入、記入事項を改ざんされたもの、および販売店の表示がないとき（但し未記入の場合でも、領収書、納品書等ご購入年月日とご購入店を証明できるものをあわせてご提示いただくことにより保証サービスをご提供いたします）。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧による故障および損傷。
 - ご購入後の運送・移動時の落下等、苛酷な環境での使用時、お取り扱いが不適切なために生じた故障および損傷。
 - 取扱説明書および本体貼付ラベル等に記載の使用法、または注意、警告に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。
 - 改造、改変またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
- 本商品の故障またはその使用上生じたお客様の損害について当社はその責に任じません。
- 保証書は商品が日本国内において使用した場合のみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料で部品交換をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の部品交換について、詳しくはセールス・オンデマンド サービスセンターまでお問い合わせください。

《販売元》

セールス・オンデマンド株式会社
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル5階
TEL:0120-542-093（通話無料）

●ご不明な点や部品交換に関するご相談は●

セールス・オンデマンド サービスセンター

TEL：0120-542-093（通話無料）※1 受付時間 9:30～17:30（土・日・祝日除く）※2

ホームページ <https://restool.jp/>

- ※1 携帯電話からでもご利用いただけます。
※2 午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやすい午後におかけください。
※3 お客様からご提供いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、カタログの発送、その他情報提供に利用させていただきます。
個人情報の取り扱い：<https://www.salesondemand.co.jp/privacy.html>